

DEEPUNITY MEDIA VIEWER

2. Informações do paciente: Nome, data de nascimento, sexo

3. Ferramentas comuns: Opções de layout, redefinir, cine. Para uma breve descrição de uma ferramenta, mova o mouse sobre o ícone para ver a dica da ferramenta.

4. Anotações e medidas: Clique na seta para abrir a lista completa.

1. Abrir painel da série: Lista de todas as séries abertas para o estudo exibido. Arraste as séries para os visores para exibi-las na Área de imagens.



INTRODUÇÃO AO DEEPUNITY MEDIA VIEWER


O DeepUnity Media Viewer vem com vários níveis de janela predefinidos para selecionar as melhores configurações de brilho e contraste para partes específicas do corpo. Use as teclas de função para selecionar os valores predefinidos.

Atalho	Predefinido
F1	Osso
F2	Fígado
F3	Pulmão
F4	Crânio
F5	Cérebro
F6	Tecido mole

[x]	Study Date	Modality
☐	Apr 30, 2012 10:2...	NM
☐	Apr 30, 2012 8:55...	NM
☐	Apr 30, 2012 8:55...	NM
☐	Apr 30, 2012 8:55...	NM


Janela de seleção de estudo:

Se o CD/DVD contiver vários estudos, você pode decidir carregar um ou mais estudos no visor. Os arquivos de imagem armazenados com o estudo podem ser muito grandes e, em alguns casos, somente um estudo pode ser carregado de uma vez. Nesse caso, clique na ferramenta de seleção do estudo no canto esquerdo superior da barra de ferramentas superior para alternar o estudo carregado.

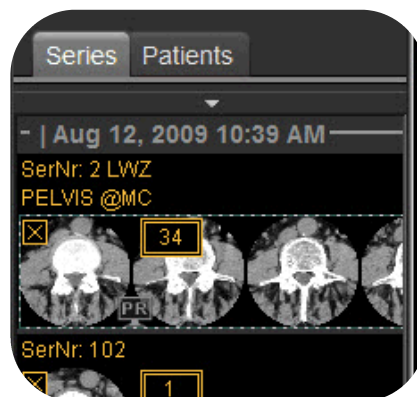

Abrir painel da série:

Arraste séries para os visores para exibi-las na Área de imagens. Clique com o botão direito nas miniaturas para outras opções.

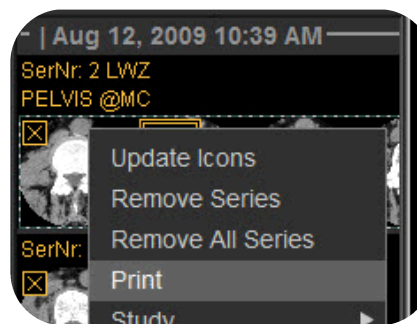

Para imprimir uma série:

- Clique com o botão direito e clique em *Imprimir*
- Ajustar outras configurações no diálogo de impressão

Os visores contêm áreas interativas: Mova o mouse sobre a imagem para ver as ferramentas no visor; arraste ou clique no ícone para usar a ferramenta.


Ícone	Ferramenta	Descrição
	Zoom	Aumentar ou Diminuir o zoom da imagem
	Deslocar	Mover a imagem no visor
	Redefinir	Redefinir imagem para estado inicial
	Girar na vertical	Girar a imagem ao longo de seu eixo x
	Girar na horizontal	Girar a imagem ao longo de seu eixo y
	Rolar de volta	Mostrar a imagem anterior na série
	Rolar para frente	Mostrar a próxima imagem na série
	Girar 90° para a esquerda	Rotação anti-horária de 90°
	Girar 90° para a direita	Rotação horária de 90°
	Excluir todas as ROIs	Excluir todas as anotações e medidas

Interação do mouse:

Clique em: Seleção da Ferramenta

Clique duas vezes: Exibe 1:1

ESPAÇO + arrastar: Deslocar

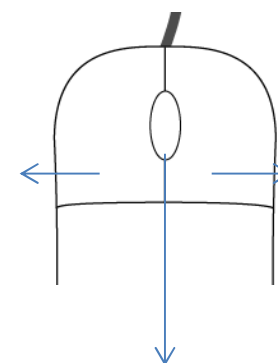

Clique em: Menu de contexto

Rolar: Rolar pela série

ESPAÇO + rolar: Mais e menos zoom

Segurar e arrastar: Mudar nível da janela

CTRL + segurar e arrastar: Ajuste do nível da janela