

DEEPUNITY MEDIA VIEWER

2. Hasta bilgisi: Ad, doğum tarihi, cinsiyet

3. Ortak araçlar: Düzen seçenekleri, sıfırlama, sine. Aracın kısa bir açıklaması için fare imlecinizi simgenin üzerine getirerek araç ipucunu görün.

4. Anotações e medidas: Clique na seta para abrir a lista completa.

1. Açık seriler paneli:
Görüntülenen vakanın açık tüm serilerinin listesi. Görüntü alanında göstermek için serileri gösterim pencerelerine sürükleyin.



DEEPUNITY MEDIA VIEWER İLE BAŞLAMA


DeepUnity Media Viewer, belirli vücut kısımları için optimum parlaklık ve kontrast ayarlarını seçmek üzere çeşitli pencere/seviye önayarları ile gelir. Önayarları seçmek için fonksiyon tuşlarını kullanın.

Kısayol	Önayar
F1	Kemik
F2	Karaciğer
F3	Akciğer
F4	Kafatası
F5	Beyin
F6	Yumuşak doku

[x]	Study Date	Modality
☐	Apr 30, 2012 10:2...	NM
☐	Apr 30, 2012 8:55...	NM
☐	Apr 30, 2012 8:55...	NM
☐	Apr 30, 2012 8:55...	NM


Vaka seçme iletişim kutusu:

CD/DVD birden fazla vaka içeriyorsa görüntüleyiciye bir veya daha fazla vaka yüklemeyi seçebilirsiniz. Vaka ile kayıtlı görüntü dosyaları çok büyük olabilir ve bazı durumlarda tek seferde sadece bir vaka yüklenebilir. Bu durumda üst araç çubuğunun sol üst köşesindeki vaka seçme aracına tıklayarak yüklü vakayı değiştirin.

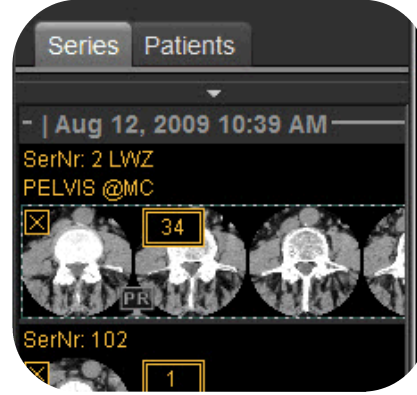

Açık seriler paneli:

Görüntü alanında göstermek için serileri gösterim pencerelerine sürükleyin. İlave seçenekler için küçük resimlere sağ tıklayın.

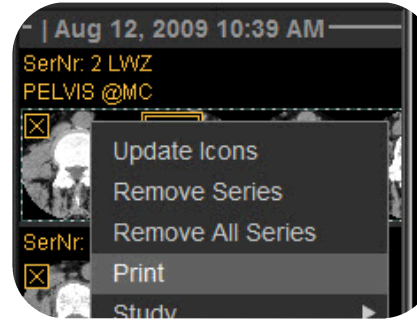

Seri yazdırmak için:


- Sağ tıklayın ve 'Yazdır'a tıklayın
- Yazdırma iletişim kutusunda ilave ayarları yapın

Gösterim pencereleri interaktif alanlar içerir: Gösterim penceresinde araçları görmek için fare imlecinizi görüntünün üzerine getirin; aracı kullanmak için simgeyi sürükleyin veya tıklayın.

Simge	Araç	Tanım
	Zum	Görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın
	Kaydır	Görüntüyü gösterim penceresinde hareket ettirin
	Sıfırla	Görüntüyü başlangıç durumuna sıfırla
	Döndür - dikey	Görüntüyü x ekseninde 90° döndürün
	Döndür - yatay	Görüntüyü y ekseninde 90° döndürün
	Geri gel	Serideki önceki görüntüyü gösterin
	İleri git	Serideki sonraki görüntüyü gösterin
	90° sola döndür	Saat yönünün aksi yönünde 90° dönüş
	90° sağa döndür	Saat yönünde 90° dönüş
	Tüm ROI'leri sil	Tüm notları ve ölçümleri silin

Fare etkileşimi:

Tıkla: Araç seçimi
Çift tıklama: 1:1 ekran
SPACE + sürük: Kaydır

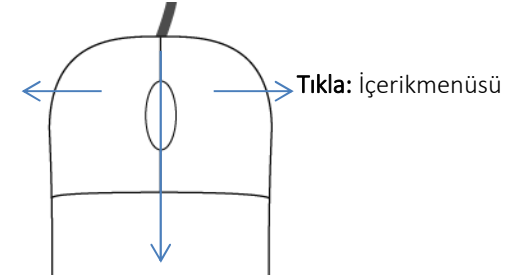

Çevir: Seri içinde gezin

SPACE + çevir: Yakınlaştır uzaklaştır

Tut ve sürük: Pencere/seviye değiştir

CTRL + tut ve sürük: Pencere/seviye ince ayar