



DeepUnity Media Viewer Gebrauchsanweisung

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Informationen	3
2 Wichtige Warnhinweise	5
3 Systemvoraussetzungen	6
4 Kurzanleitung öffnen	7
5 Rundgang Image Area	8
Index	11

Rechtliche Informationen



Copyright

Copyright © 2020 by DH Healthcare GmbH, Konrad-Zuse-Platz 1, 53227 Bonn, Deutschland.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch darf ohne vorheriger schriftlicher Genehmigung von DH Healthcare weder vollständig noch auszugsweise kopiert, fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder in eine elektronische oder maschinenlesbare Form übertragen werden.

Trademarks

Windows® XP und Windows® 7 sind Marken von Microsoft Corporation.

Java ist eine Marke der Oracle Corporation.

Weitere Informationen über DH Healthcare-Produkte erhalten Sie unter www.dedalusgroup.de, Ihrer Informationsadresse.

Haftungsausschluss

DH Healthcare bürgt weder ausdrücklich noch stillschweigend für die Richtigkeit, die Vollständigkeit oder den Nutzen der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen und lehnt ausdrücklich jede Garantie für die Eignung zu irgendeinem besonderen Zweck ab. DH Healthcare haftet in keiner Weise für Schäden aufgrund der Verwendung oder Unbrauchbarkeit jedweder in diesem Handbuch angegebenen Informationen, Vorrichtungen, Methoden oder Verfahren.

Änderungsvorbehalt

DH Healthcare behält sich das Recht zur Änderung dieses Handbuches ohne vorherige Ankündigung vor.

Letzte Aktualisierung dieses Handbuches: 2020.06.25

Hersteller

DH Healthcare GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1

53227 Bonn

Deutschland

Herstellergewährleistung

Der Hersteller, Händler oder Montagetechniker übernimmt die Verantwortung für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung der Geräte/Software nur, wenn

- die Installation, Modifikation, Anpassung, Änderung oder Reparatur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt wird,
- die Elektroinstallationen der Umgebung, in welcher die Geräte/Software benutzt werden, den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen,
- die Geräte/Software gemäß den Anweisungen in den Benutzerhandbüchern benutzt werden.

Wichtige Warnhinweise

2

Verwendung des DeepUnity Media Viewer

Der DeepUnity Media Viewer darf NICHT zur Diagnosestellung oder zu chirurgischen Vorbereitungen herangezogen werden.

Messergebnisse

Die Messergebnisse sind anhand der rechts im Bild eingeblendeten Skala und des anatomischen Aufbaus auf Plausibilität zu überprüfen.

Systemvoraussetzungen

3

Komponente	Mindestens
RAM	2 GB
Betriebssystem	Windows XP oder neuer
Minimalauflösung der Bildschirme	1024x768 (unter den Minimalvoraussetzungen wird der DeepUnity Media Viewer zur Gänze angezeigt, allerdings wurde die Schaltfläche zum Leeren des Bildbereichs für die Minimalauflösung entfernt)

Kurzanleitung öffnen

4

Zusätzlich zu dieser Publikation finden Sie in der Applikation eine praktische Kurzanleitung zum DeepUnity Media Viewer.


Um die Kurzanleitung für den DeepUnity Media Viewer zu öffnen

1. Klicken Sie auf das Fragezeichen in der linken oberen Ecke der Applikation.

Rundgang Image Area

5


Übersicht Image Area (Bildbereich)

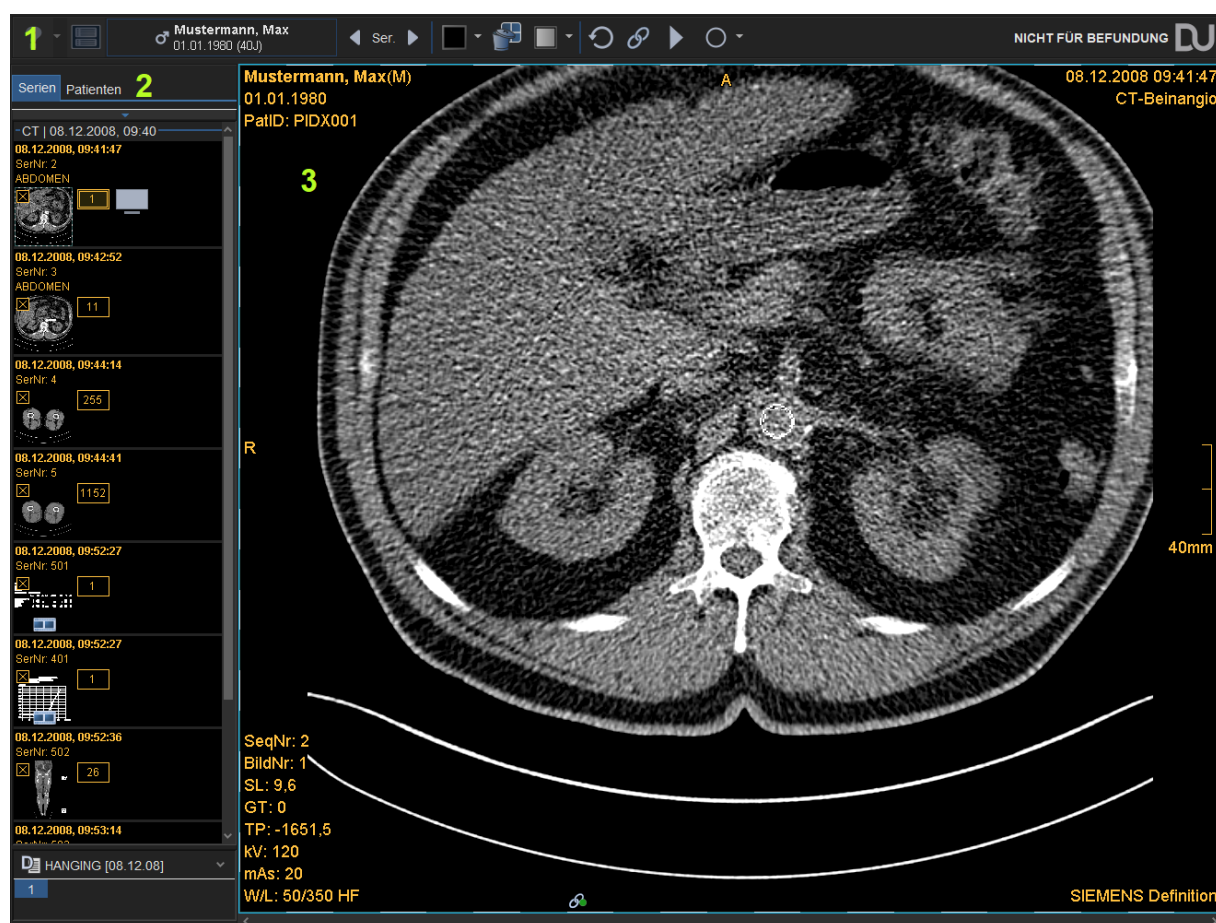

Nr.	Name	Beschreibung
1	Top-Toolbar	Patientenname, Hilfe, Studienauswahl, Werkzeuge für die Bilddarstellung und Navigation.

Nr.	Name	Beschreibung
2	Serienpalette	Die Serienpalette hat zwei Register: Register Serien: • Studientabelle (Studien eines Patienten) • Serienvorschau • Aufhängungen / Schnappschüsse Register Patienten: • Hier werden alle geladenen Patienten angezeigt.
3	Serien-Anzeige	Auf jedem Bildschirm können 1-64 Serien gleichzeitig angezeigt werden. Von jeder Serie können 1-64 Einzelbilder gleichzeitig angezeigt werden.

Übersicht Serien-Anzeige

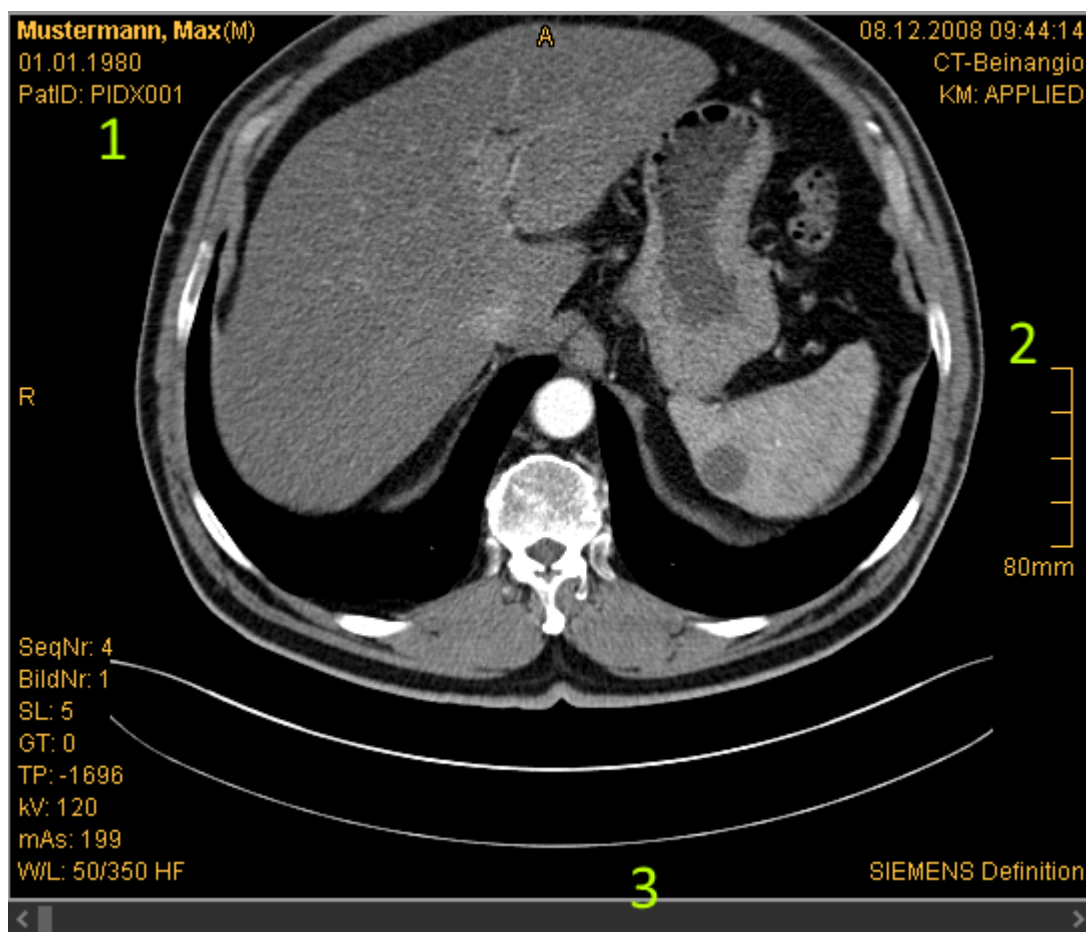

Nr.	Name	Beschreibung
1	Patientendaten	Patientendaten, technische und auftragsbezogene Daten, Daten der Modalität, Patienten-Orientierung
2	Lineal	Lineal und Kalibrierungsinformation
3	Scrollbar	Damit kann jedes Bild schnell erreicht und genau angesteuert werden.

Index

I

Image-Area

Rundgang..... 8

Überblick..... 8

R

Rechtliche Informationen

Änderungsvorbehalt..... 3

CE-Zeichen..... 3

Copyright..... 3

Haftungsausschluss..... 3

Hersteller..... 3

Herstellergewährleistung..... 3

Meldung von Vorkommnissen..... 3

Trademarks..... 3

Rundgang

Image-Area..... 8

S

Systemvoraussetzungen

Empfohlene Grundausstattung..... 6

Minimalausstattung..... 6

U

Überblick

Image-Area..... 8

W

Wichtige Warnhinweise

Messergebnisse..... 5

Verwendung..... 5